


**SIEMENS**

---

# RI 100-3

Instructions pour l'usage

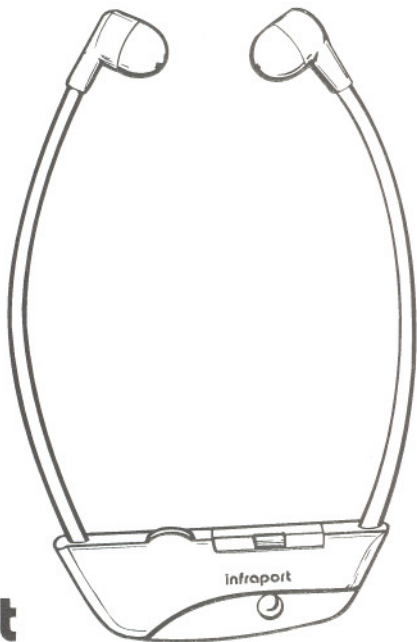

**infraport**

## Ensemble audio mono à infrarouge RI 100-3

Ensemble audio mono à infrarouge RI 100-3 pour la transmission sans fil de musique et de la parole émis par un émetteur à infrarouge approprié.

### Utilisation:

- Pour la transmission du son TV
- Au théâtre ou dans des conférences pour une meilleure intelligibilité

### Caractéristiques:

- Sonorité de haute qualité
- Très léger et port extrêmement confortable
- Puissance élevée
- Ajustable à la capacité auditive de chacun
- Simple à utiliser
- Fonctionnement économique sur accumulateur
- Chargement des accumulateurs BA 90 dans l'émetteur ou à l'aide du dispositif de chargement L 90

### Caractéristiques techniques:

Fréquence porteuse	95 kHz $\pm$ 25 kHz, FM
Bande passante	30 - 18.000 Hz
Rapport signal/bruit	65 dB(A)
Pression acoustique maximale à 1 kHz	124 dB environ
Distorsion harmonique à 1 kHz	< 1 %
Atténuation des graves ajustable	jusqu'à 20 dB/100 Hz environ
Contrôle de niveau	atténuation jusqu'à 30 dB, ajustable séparément pour le système droite et gauche
Alimentation	accumulateur BA 90 (N° 03261)
Temps de fonctionnement	10 heures environ
Temps de chargement	18 heures environ
Poids	40 g environ (avec accumulateur)

### Elimination des défauts:

Pas de son. Bruit de fond uniquement...

Emetteur non raccordé au secteur ou pas mis en circuit

Contrôle de volume à la position maximale, mais pas de son...

Signal trop faible, contrôler le branchement sur l'émetteur! Le volume sur prise casque peut être réglé séparément? Voir mode d'emploi des appareils TV et Hi-Fi.

Distorsions du son...

Accumulateur déchargé, rechargez le tout de suite!

Son légèrement bruité

L'émetteur n'est pas orienté de manière optimale, la réception est interrompue.


**Avant la première mise en service du récepteur, recharger l'accumulateur pendant au moins 24 heures!**

**Après chaque utilisation, mettre hors circuit le récepteur!**

Les coussinets doivent être nettoyés à l'eau légèrement savonneuse de temps en temps.

Sous réserve de modification technique.


Mise en marche de l'appareil/  
Réglage du volume

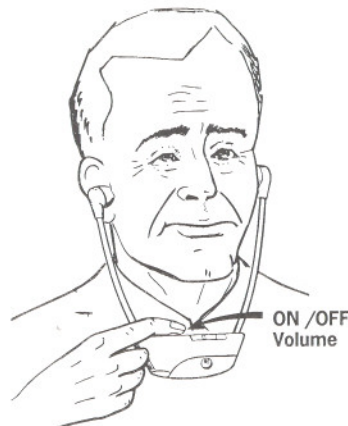


Ne couvrir pas les diodes infrarouges!



Remplacement de l'accumulateur  
Chargement de l'accumulateur dans l'émetteur

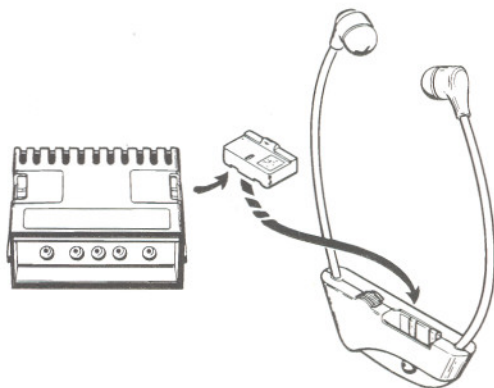

#### Accessoires

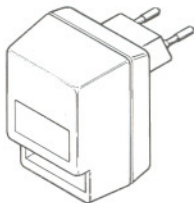

Art.Nr.: 03262  
Chargeur L 90



Art. Nr.:03261  
Fiche d'accu BA 90